


	<b>PRODUCTO</b>	SIGOSOFT	Manual de Instalación - Sistema Odontológico - BIMS International Company S.A.C.		
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Odontológico Comercial.			
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2018	

## INDICE

I.	INSTALACIÓN DEL SOFTWARE SIGOSOFT .....	2
II.	INSTALACIÓN DEL CRYSTAL REPORT .....	2
III.	INSTALACIÓN DEL MENU CREATOR .....	2
IV.	INSTALACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES .....	2
V.	VALIDAR ARCHIVOS .INI. ....	3
VI.	CONFIGURAR EL SERVIDOR SQL-Server 2014.....	4
VII.	LICENCIA. ....	4
VIII.	REUTILIZAR LICENCIA. ....	7

<b>Actualización:</b> 01/04/2017	Versión 2.3	MU-SO
	Página 1 de 7	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	SIGOSOFT	Manual de Instalación - Sistema Odontológico - BIMS International Company S.A.C.		
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Odontológico Comercial.			
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2018	

## I. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE SIGOSOFT

- Como primer paso el sistema odontológico deberá de ser instalado utilizando el disco de instalación en la carpeta **x:\instalador sigosoft\**.
- Luego seleccionaremos la opción que dice **setup\_x64.exe** y daremos click derecho sobre ello y se mostrará un menú contextual en donde escogeremos la opción **Ejecutar como Administrador** y con ello empezaremos la instalación del producto.
- Se nos visualizará un Cuadro de Diálogo en donde le indicaremos la ruta en donde deseamos instalar el producto, dejamos los datos por default y le daremos continuar.
- Por último daremos clic en el botón Finalizar.

## II. INSTALACIÓN DEL CRYSTAL REPORT

- Luego de haber realizado el primer paso procederemos a realizar la instalación del Crystal Report v8.5 o superior.



## III. INSTALACIÓN DEL MENU CREATOR

- Luego de haber realizado el segundo paso procederemos a realizar la instalación del Menu\_Creator\_2005.

## IV. INSTALACIÓN DE COMPONENTES ADICIONALES

- Al finalizar la instalación del tercer punto procederemos a la instalación de los siguientes OCX indispensables para el funcionamiento del software, este punto solo se ejecutará en caso existan problemas al registrar los OCX (se realizará este paso para el Windows 7 o superior).

<b>Actualización:</b> 01/04/2017	Versión 2.3	MU-SO
	Página 2 de 7	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	SIGOSOFT	Manual de Instalación - Sistema Odontológico - BIMS International Company S.A.C.		
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Odontológico Comercial.			
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2018	

- Copiar los archivos ubicados en la carpeta Nuevos OCX en **C:\Windows\SysWOW64**.
- Luego registrar los archivos utilizando el siguiente archivo: **RegistroOCX.bat** ejecutar este archivo como administrador:

## V. VALIDAR ARCHIVOS .INI.

- Al finalizar el último punto proceder a revisar los siguientes archivos ubicados en la ruta donde instaló el software odontológico Sigosoft:

- Unidad:\Carpeta de Sigosoft\sigosoft.ini.
- Unidad:\Carpeta de Sigosoft\Licencia\sigosoft.ini.

- En el primer archivo ubicarse en la opción de **RUTAS** y luego proceder a indicar la ruta exacta de instalación del software Sigosoft.

[RUTAS]

VALOR=D:\SIGOSOFT\_EMPRESA\

USUARIO=D:\SIGOSOFT\_EMPRESA\FOTOS\USUARIO\

PACIENTE=D:\SIGOSOFT\_EMPRESA\FOTOS\PACIENTE\

IMAGEN=D:\SIGOSOFT\_EMPRESA\IMAGEN\

REPORTE=D:\SIGOSOFT\_EMPRESA\REPORTES\

BACKUP=D:\SIGOSOFT\_EMPRESA\BACKUPS\

BACKUPDESTINO=\\SRVTESTDEV\SIGOSOFT\BACKUPS\



ZIP=D:\SIGOSOFT\_EMPRESA\ZIPS\

- En el segundo archivo ubicarse en la opción de **RUTAS** y luego proceder a indicar la ruta exacta de instalación del software Sigosoft.

[RUTAS]

VALOR=D:\SIGOSOFT\_EMPRESA\

<b>Actualización:</b> 01/04/2017	Versión 2.3	MU-SO
	Página 3 de 7	Autor: John Ubillus G.


	<b>PRODUCTO</b>	SIGOSOFT	Manual de Instalación - Sistema Odontológico - BIMS International Company S.A.C.		
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Odontológico Comercial.			
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2018	

## VI. CONFIGURAR EL SERVIDOR SQL-Server 2014.

- En el **SQL-Server 2014** deberá de crear en la opción **Herramienta del Cliente** un alias llamado **UNSO** en donde estará direccionado por TCP/IP al servidor.
- Los dos archivos **sigosoft.ini** proceder a modificar en la opción **SERVIDOR** y en el **VALOR** definir el nombre del servidor o el ip del mismo:  
[SERVIDOR]  
VALOR=NOMBRESERVIDORSQL



## VII. LICENCIA.

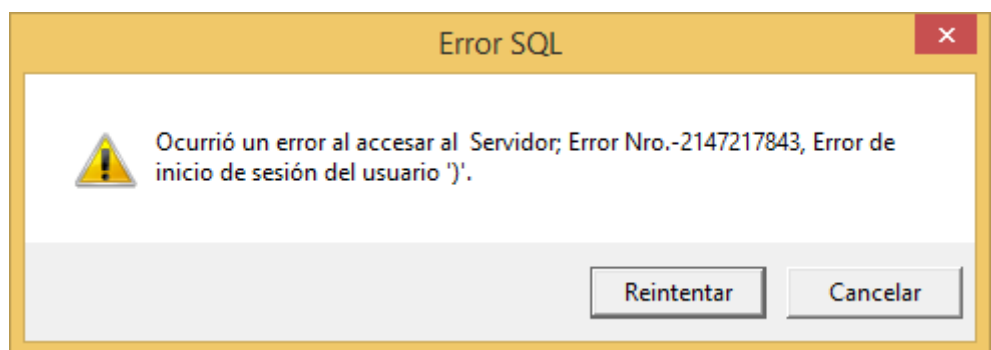
- Al finalizar el proceso deberá de ejecutar el archivo **LicenciaSigosoft(VERSION).exe** ubicado en la ruta **Unidad:\SIGOSOFT\_EMPRESA\Licencia\**, y se visualizará la siguiente pantalla:




Dar clic en el botón **Cancelar**, este error se debe a que aún no le ha asignado el usuario y la contraseña que utilizará para acceder al servidor SQL-Server. Luego de ello se mostrará la siguiente pantalla:


<b>Actualización:</b> 01/04/2017	Versión 2.3	MU-SO
	Página 4 de 7	Autor: John Ubillus G.


	<b>PRODUCTO</b>	SIGOSOFT	Manual de Instalación - Sistema Odontológico - BIMS International Company S.A.C.		
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Odontológico Comercial.			
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2018	

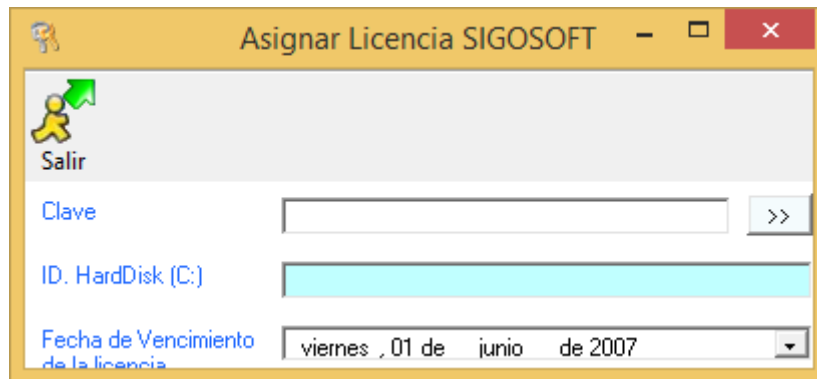

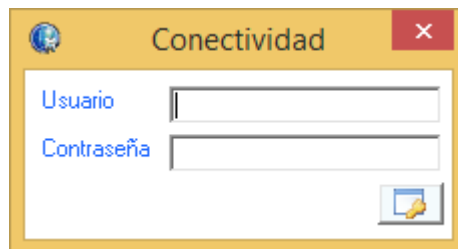

- A continuación deberá de ubicarse en el textbox de la Clave y procederá a presionar la tecla **F12** y se visualizará la siguiente pantalla:

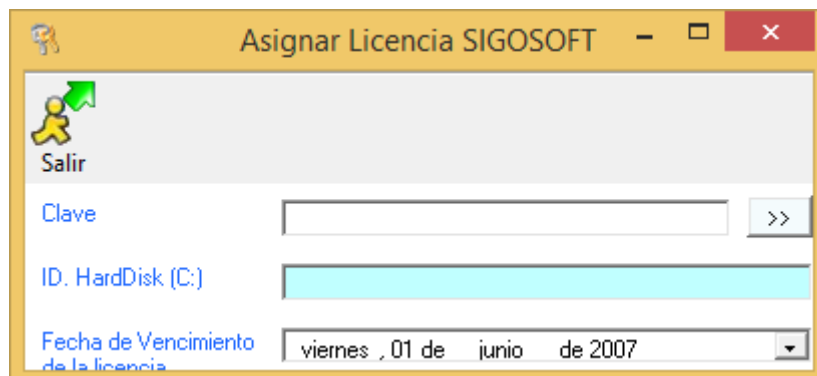



En dicha pantalla ingresará el usuario y la contraseña con utilizará para conectarse al SQL-Server por ejemplo: **sa** y **123456789** al finalizar dar click sobre el siguiente botón . Luego de ello proceder a cerrar el aplicativo de asignación de licencias y volver a ejecutar como administrador (Ya no se mostrará el error del servidor porque ya lo asignó).




<b>Actualización:</b> 01/04/2017	Versión 2.3	MU-SO
	Página 5 de 7	Autor: John Ubillus G.

	<b>PRODUCTO</b>	SIGOSOFT	Manual de Instalación - Sistema Odontológico - BIMS International Company S.A.C.		
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Odontológico Comercial.			
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2018	

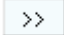

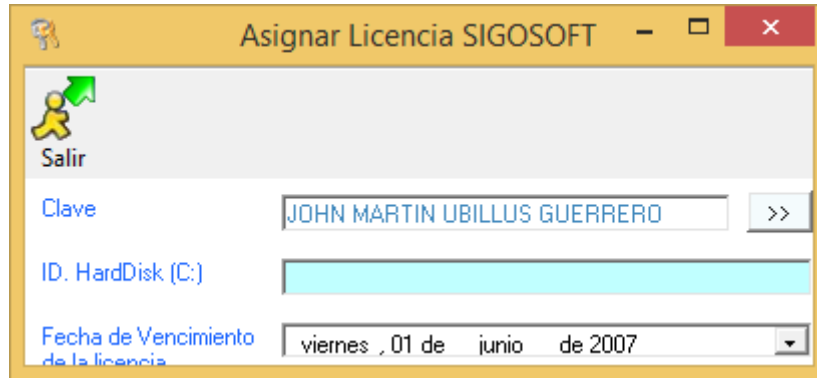- Deberá de ubicarse en el textbox de la Clave y proceder a escribir lo siguiente: **JOHN MARTIN UBILLUS GUERRERO** y luego proceder a dar click en el botón: 

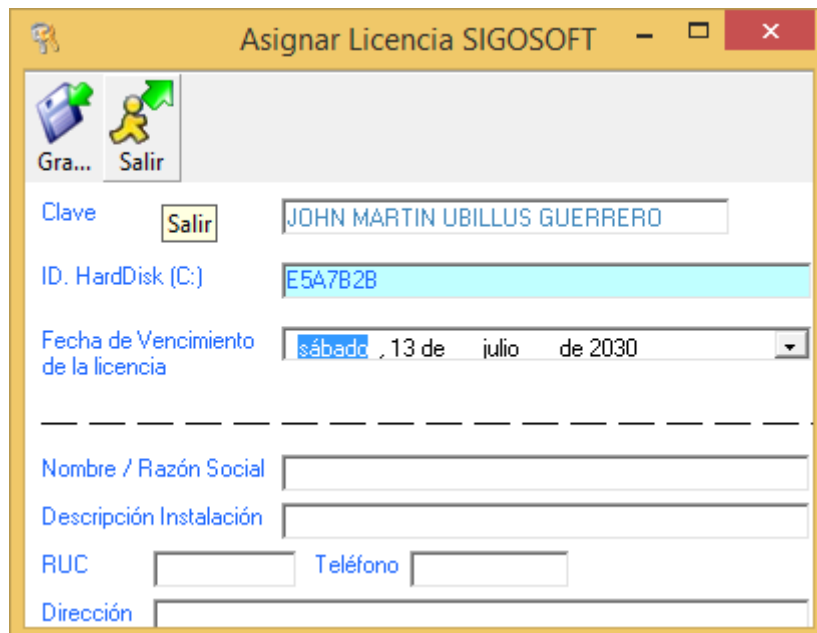

- Luego de ello se activará el ID. HardDisk y el resto de opciones, debe de tener en cuenta de registrar los datos correctamente en este punto para no presentar ninguna incidencia a futuro, al finalizar dar clic en el botón **Grabar**:




<b>Actualización:</b> 01/04/2017	Versión 2.3	MU-SO
	Página 6 de 7	Autor: John Ubillus G.


	<b>PRODUCTO</b>	SIGOSOFT	Manual de Instalación - Sistema Odontológico - BIMS International Company S.A.C.		
	<b>PROYECTO</b>	Sistema Odontológico Comercial.			
	<b>AMBITO</b>	PUBLICO	<b>VERSIÓN</b>	2018	

## VIII. REUTILIZAR LICENCIA.

- Si al ejecutar el programa de licencias se visualiza el siguiente mensaje, es porque no existen licencias disponibles. En el caso de querer reutilizar una o realizar una reinstalación siga las siguientes indicaciones.

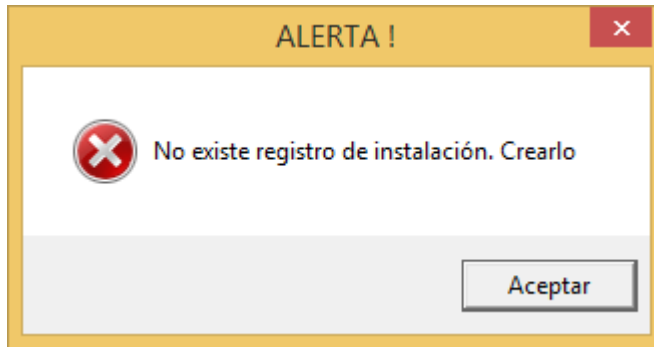

- Ubicarse en el textbox Clave y presionar la tecla **F8** y se mostrará la siguiente pantalla:

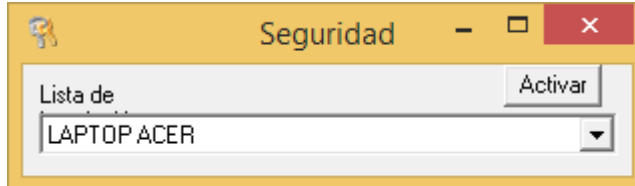

- Se mostrará un listado de las actuales licencias, lo que deberá hacer es seleccionar la que no utilizará y dar clic en el botón de **Activar**. Cerrar el aplicativo de licencias y volver a ejecutarlo como administrador. Luego simplemente seguir los pasos del punto VII.

<b>Actualización:</b> 01/04/2017	Versión 2.3	MU-SO
	Página 7 de 7	Autor: John Ubillus G.